

Limpieza General

Es muy importante mantener limpio tu audífono, nos asegura un correcto funcionamiento durante mucho tiempo y evita toda clase de posibles infecciones. Para ello, te ofrecemos a continuación unos consejos útiles:

1. Separa las partes lavables de tu audífono, son las que están hechas de goma y que no contienen circuitería.
2. Una vez separadas introducelas en un recipiente con agua tibia y jabón durante unos minutos.
3. Dentro del agua tibia, frota un poco las piezas de tu aparato auditivo para ayudar a eliminar los residuos restantes.
4. A continuación, retira las piezas del recipiente con agua, enjuaga con agua abundante y deja secar en una toalla hasta que se seque por completo.
5. Toma el cepillo pequeño y cepilla con fuerza moderada las otras piezas de tu audífono que no pudiste introducir en el agua.
6. Finalmente toma un paño húmedo y limpia muy bien las partes que no lavaste en agua tibia y listo, puedes volver a ensamblar.

AUDIFONO INTRACANAL: En el caso de utilizar un audífono "invisible" la limpieza es mucho más sencilla aunque debe de ser más constante. Realiza los pasos 5 y 6 de la explicación anterior.

Cambiar Filtros

Se recomienda cambiar los filtros entre cada 1 a 3 meses, esto dependerá de diversos factores como puede ser la cantidad de cera que genera o la irritabilidad del canal auditivo del usuario. Será necesario estar en alerta al realizar la limpieza rutinaria de tu audífono para comprobar si es necesario reemplazar nuestro filtro. Preguntar al audioprotesista en caso de duda.

Una de las alarmas más comunes, cuando tenemos el filtro obstruido de cera, es una disminución notoria de la audición con el audífono, toca cambiar el filtro. Si la pérdida de audición persiste, acuda a su audioprotesista.


Para cambiar el filtro siempre se utilizará la varilla de plástico incluida en el pack de filtros. Extraemos el filtro usado por uno de sus extremos y lo sustituiremos por otro nuevo situado en el extremo opuesto de la varilla. En el caso de tener que cambiar el filtro a un molde o a un audífono "invisible" el procedimiento es similar, sólo que cuando retiramos el antiguo, tendremos que coger con el otro extremo un filtro nuevo de la "rueda de filtros".

Pilas y Bateria Recargable

Una de las dudas más comunes es saber cuándo deberíamos cambiar una pila a nuestro audífono. Es muy sencillo. Nuestra ayuda auditiva es inteligente y avisará, de campanas intermitentes para advertirnos de que la batería está baja y es hora de cambiarla. Si no la cambiamos en el momento del aviso, la calidad de audición se irá reduciendo hasta que se apague por completo pasadas unas horas.

Recomendamos siempre tener una rueda de pilas de emergencia a mano.

Si nuestro audífono es recargable el aviso de batería baja es similar, nos avisará en el momento que tengamos que cargarlo.

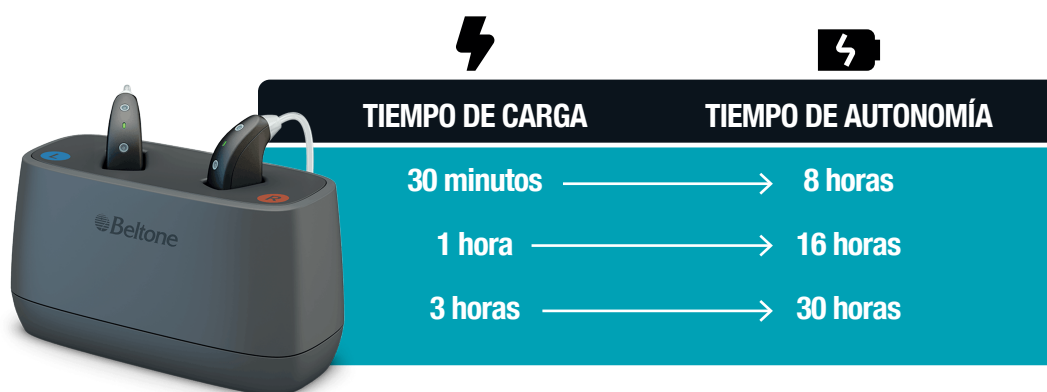

 **96 503 30 38**

www.interoptics.es   @interopticsalfaz

C/ Prínceps d'Espanya 17, 03580 L'Alfàs del Pi, **Frente al Centro de Salud**